

ZESTAWY
JEDNORAZOWEGO
UŻYTKU

Argyle – zestawy do drenażu klatki piersiowej

▲ NEGATIVE PRESSURE
ARGYLE®



tyco
Healthcare

Thora Seal I

Jednokomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej




- Zestaw jednorazowego użytku, z jedną komorą do drenażu klatki piersiowej, do stosowania przy wykorzystaniu siły grawitacji lub kontrolowanego ssania
- Przezroczysta komora zbiorcza z poliwęglanów o pojemności 2000 ml, z podziałką co 20 ml, z powierchnią umożliwiającą zapisywanie notatek.
- Wykonany z medycznego PCV przewód drenujący, przezroczysty z łącznikiem do cewnika piersiowego.
- Metalowy wspornik do bezpiecznego umieszczenia zestawu na łóżku lub podłodze
- Przy zastosowaniu dodatkowego zestawu Argyle* może być połączony z zestawami wielokomorowymi

NR REF.	OPIS	OBJĘTOŚĆ ZBIORCZA ml	ILOŚĆ W OPAKOWANIU
8884-713100	THORA SEAL I z dołączonym sztywnym przewodem	2.000	6
1814-713105	THORA SEAL I bez przewodu	2.000	6
8884-729500	Przewód drenażowy przystosowany do 1814-713105	-	12

Thora Seal II

Oryginalny dwukomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej

- Zestaw jednorazowego użytku z dwoma komorami do drenażu klatki piersiowej, do stosowania przy wykorzystaniu siły grawitacji lub kontrolowanego ssania.
- Trzyczęściowa komora zbiorcza o pojemności 2600 ml, z możliwością napełniania sekwencyjnego.
- Skala z podziałką pediatryczną, z możliwością dokonywania na niej zapisów.
- Uszczelniona komora wodna oddzielona od zdrenowanego płynu, do zminimalizowania wzrostu ciśnienia hydrostatycznego.
- Otwór odprowadzający powietrze lub połączenie do źródła kontrolowanego ssania
- Miękki, wykonany z medycznego PCV przewód umożliwiający użycie zacisku rolkowego do odprowadzenia i przemieszczania wydzieliny w drenie, typu Roller Miller [nr ref: 888578888]
- Mechanizm zapobiegający załamaniu i skręcaniu się drenu
- Stabilna podstawa oraz hak w kształcie pętli
- Zestaw odpowiedni do drenażu płynów
- Produkt bezłateksowy


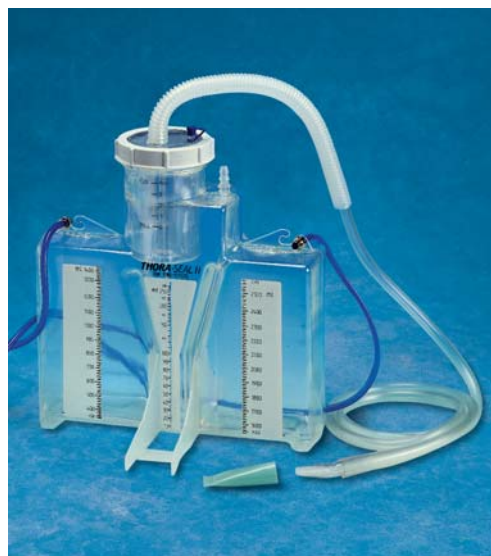


NR REF.	OPIS	OBJĘTOŚĆ ZBIORCZA ml	ILOŚĆ W OPAKOWANIU
1180-571570	THORA SEAL II	2.600	5

Thora Seal III

Trzykomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej

- Zestaw jednorazowego użytku z trzema komorami do drenażu klatki piersiowej, do stosowania przy wykorzystaniu siły grawitacji lub kontrolowanego ssania
- Przezroczysta komora zbiorcza z poliwęglanów o pojemności 2500 ml, składająca się z trzech części dla sekwencyjnego napełniania, łatwiejszego monitorowania drenowanych płynów, ze skalą umożliwiającą zapisywanie notatek.
- Wymienna komora zbiorcza z mocowaniem bagnetowym, do minimalizacji kosztów.
- Miękki przewód drenujący (bezzleksowy) umożliwiający użycie zacisku rolkowego do odprowadzenia i przemieszczania wydzieliny w drenie, typu Roller Miller [nr ref: 8888578888], samuszczelniający się przy pobieraniu próbek zdrenowanego płynu. Przewód zaopatrzony jest w mechanizm zapobiegający załamaniu się i skręcaniu.
- Automatyczny zawór upustowy ciśnienia, uwalniający powietrze w przypadku nadmiaru ciśnienia dodatkowego
- Ekran akustyczny oraz mechanizm anty-bulgocący w kontrolnej komorze ssania, do zapewnienia cichego działania zestawu
- System antyrefluksowy zapewniający pozostanie wody w komorze, służący zabezpieczeniu zastawki podwodnej, nawet wówczas, gdy zestaw ulegnie przewróceniu
- Stojak podłogowy oraz haki do bezpiecznego umieszczenia na podłodze lub łóżku pacjenta
- Produkt bezzleksowy

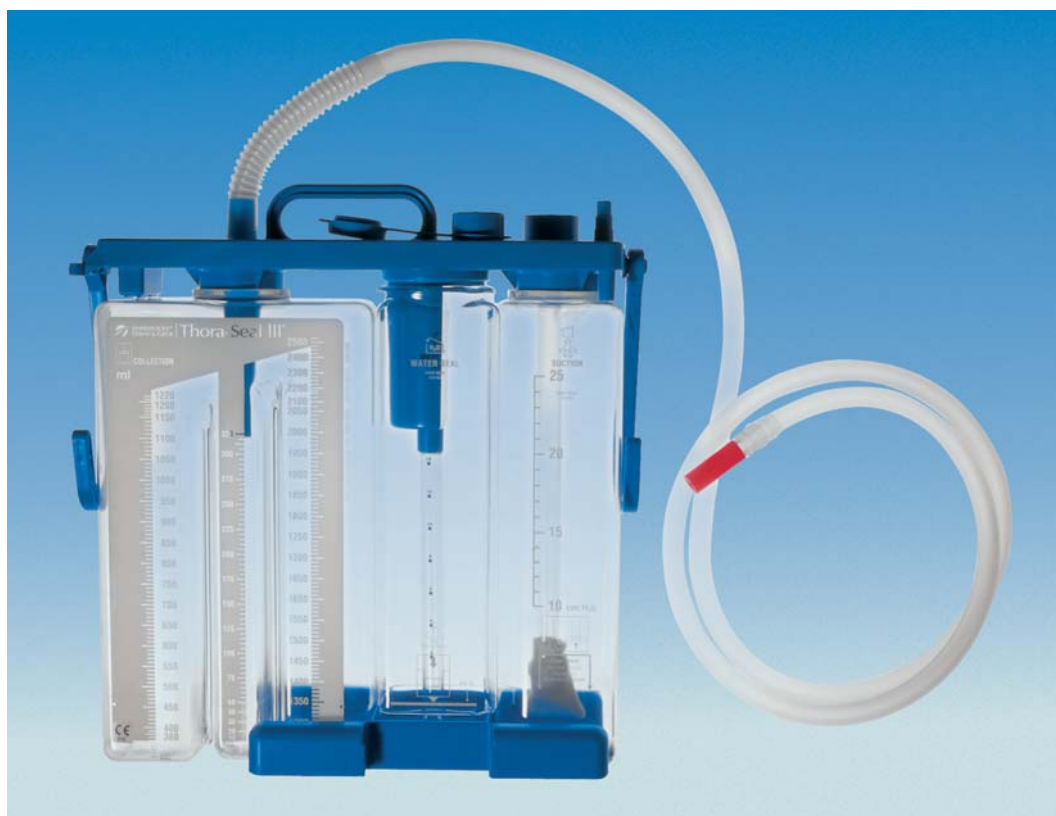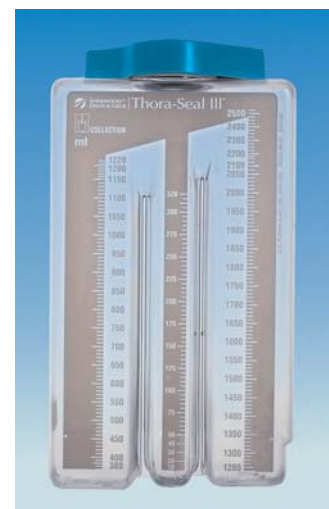

NR REF.	OPIS	OBJĘTOŚĆ ZBIORCZA ml	ILOŚĆ W OPAKOWANIU
8884-713308	THORA SEAL III z wymienną komorą zbiorczą	2.500	4
8884-713900	Komora zbiorcza do THORA SEAL III	2.500	6

Aqua Seal

Trójkomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej

- Zestaw jednorazowego użytku z trzema komorami do drenażu klatki piersiowej, do stosowania przy wykorzystaniu siły grawitacji lub kontrolowanego ssania
- Przezroczysta komora zbiorcza z poliwęglanów o pojemności 2500 ml, składająca się z trzech części dla sekwencyjnego napełniania, z pediatricznym stopniowaniem skali w celu łatwiejszego monitorowania drenowanych płynów, ze skalą umożliwiającą zapisywanie notatek.
- Miękki monoprenowy przewód (bezląteksowy) umożliwiający użycie zacisku rolkowego do odprowadzenia i przemieszczania wydzieliny w drenie, typu Roller Milker [nr ref: 8888578888], samouszczelniający się przy pobieraniu próbek zdrenowanego płynu
- Zaopatrzony w mechanizm zapobiegający załamaniu i skręcaniu się drenu
- Zawór ręczny z filtrem antybakteryjnym oraz pokrywą zabezpieczającą do kontroli nadmiaru podciśnienia
- Automatyczny zawór upustowy ciśnienia, uwalniający powietrze w przypadku nadmiaru ciśnienia dodatniego
- System antyrefluksowy zapewniający pozostanie wody w komorze, służący zabezpieczeniu zastawki podwodnej, nawet wówczas, gdy zestaw ulegnie przewróceniu
- Wbudowany statyw podłogowy, haki łóżkowe oraz uchwyty dla łatwiejszego umieszczenia zestawu oraz jego transportu
- Produkt bezłateksowy



NR REF.	OPIS	OBJĘTOŚĆ ZBIORCZA ml	ILOŚĆ W OPAKOWANIU
8888-571299	AQUA SEAL z jedną komorą zbiorczą	2300	5
8888-571406	AQUA SEAL z podwójną komorą zbiorczą	1265 e 1050	5

Altitude

Trzykomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej

- Zestaw jednorazowego użytku z trzema komorami do drenażu klatki piersiowej, do stosowania przy wykorzystaniu siły grawitacji lub kontrolowanego ssania
- Przezroczysta komora zbiorcza z poliwęglanów o pojemności 2.500ml, składająca się z trzech części dla sekwencyjnego napełniania, z pediatricznym stopniowaniem skali do łatwiejszego monitorowania drenażowanych płynów, ze skalą umożliwiającą zapisywanie notatek
- Miękki monoprenowy przewód (bezzleksowy) umożliwiający użycie zacisku rolkowego do odprowadzenia i przemieszczania wydzieliny w drenie, typu Roller Miller [nr ref: 8888578888], samouszczelniający się przy pobieraniu próbek zdrenowanego płynu. Obejmuje także bezgłowy port do pobierania próbek
- Mechaniczny regulator ssania (10–40 cm H₂O) ze stopniowaniem co 5 cm H₂O, zwiększający stopniowo siłę ssania bez potrzeby dodawania lub usuwania wody
- Wskaźnik ssania potwierdzający prawidłowe działanie
- Przewód zaopatrzony w mechanizm zapobiegający załamaniu i skręcaniu się drenu
- Zawór ręczny z filtrem antybakteryjnym oraz pokrywą zabezpieczającą do kontroli zwiększonego podciśnienia
- Automatyczny zawór upustowy ciśnienia, uwalniający powietrze w przypadku nadmiaru dodatniego ciśnienia
- System antyrefluksowy zapewniający pozostanie wody w komorze, służący zabezpieczeniu zastawki podwodnej, nawet wówczas, gdy zestaw ulegnie przewróceniu
- System kompatybilny z urządzeniami do autotransfuzji – Argyle
- Wbudowany statyw podłogowy, haki łózkowe oraz uchwyty do łatwiejszego umieszczenia zestawu oraz jego transportu
- Produkt bezzleksowy



NR REF.	OPIS	OBJĘTOŚĆ ZBIORCZA ml	ILOŚĆ W OPAKOWANIU
8888-571370	Altitude* wstępne ustawienie do autotransfuzji	2500	5

Sentinel Seal

Czterokomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechanicznym regulatorem ssania

- Zestaw jednorazowego użytku z czterema komorami do drenażu klatki piersiowej, do stosowania przy wykorzystaniu siły grawitacji lub kontrolowanego ssania
- Przezroczysta komora zbiorcza z poliwęglanów, składająca się z trzech części dla sekwencyjnego napełniania, z pediatrycznym stopniowaniem skali oraz z powierzchnią umożliwiającą nanoszenie notatek
- Miękki monoprenowy przewód (bezlątkowy) umożliwiający użycie zacisku rolkowego do odprowadzenia i przemieszczania wydzieliny w drenie, typu Roller Milker [nr ref: 8888578888], samouszczelniający się przy pobieraniu próbek zdrenowanego płynu. Obejmuje także bezigłowy port do pobierania próbek
- Przewód zaopatrzony w mechanizm zapobiegający załamaniu i skręcaniu się drenu
- Zawór ręczny z filtrem antybakteryjnym oraz pokrywą zabezpieczającą w celu kontroli nadmiaru podciśnienia
- Automatyczny zawór upustowy ciśnienia, uwalniający powietrze w przypadku nadmiaru dodatniego ciśnienia
- System antyrefluksowy zapewniający pozostanie wody w komorze, służący zabezpieczeniu zastawki podwodnej, nawet wówczas, gdy zestaw ulegnie przewróceniu
- System kompatybilny z urządzeniami do autotransfuzji – Argyle
- Wbudowany statyw podłogowy, haki łóżkowe oraz uchwyty w celu łatwiejszego umieszczenia zestawu oraz jego transportu
- Komora kontrolna, umożliwiająca podgląd wartości podciśnienia w klatce piersiowej, co zapewnia precyzyjną kontrolę nad efektywnym poziomem ssania
- Mechaniczny regulator ssania pozwala kontrolować ssanie bez potrzeby dodawania lub usuwania wody
- Produkt bezłateksowy



NR REF.	OPIS	OBJĘTOŚĆ ZBIORCZA ml	ILOŚĆ W OPAKOWANIU
8888-571562	SENTINEL SEAL z jedną komorą zbiorczą	2500	5
8888- 571513	SENTINEL SEAL z podwójną komorą zbiorczą	1400 e 1100	5

Zestawy jednorazowego użytku do drenażu klatki piersiowej

Z autotransfuzją ARGYLE*

Ryzyko związane z przenoszeniem chorób wirusowych podczas transfuzji (wirusowe zapalenie wątroby, AIDS itd.) oraz ograniczenie dostępu do krwi powodują coraz częstsze stosowanie technik autotransfuzyjnych. Świadoma potrzeb swoich klientów, firma TYCO HEALTHCARE proponuje bezpieczny oraz wydajny zestaw autotransfuzyjny do odzyskiwania oraz utylizacji krwi autologicznej.

Wymienione zestawy ARGYLE jednorazowego użytku do drenażu klatki piersiowej (THORA SEAL III, AQUA SEAL, SENTINEL SEAL & ALTITUDE) dostępne są z workami do gromadzenia krwi.

- Worek do gromadzenia krwi o pojemności 1000 ml
- 200 mikronowy filtr w górnej części worka, połączony z portami wejścia i wyjścia blokujący skrzepliny, bez ryzyka cofania się krwi do jamy klatki piersiowej w przypadku pojawienia się przeszkody
- Zawór lateksowy do wstrzykiwania leków przeciwkrzepliowych
- Możliwość stałego ponownego podania krwi podczas drenażu z zastosowaniem infuzji pompy grawitacyjnej



NR REF.	OPIS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU
8884-713176	THORA SEAL III wstępne ustawienie do autotransfuzji	4
8888-571315	AQUA SEAL wstępne ustawienie do autotransfuzji	5
8888-571489	SENTINEL SEAL wstępne ustawienie do autotransfuzji	5
8888-571370	ALTITUDE wstępne ustawienie do autotransfuzji	5
8884-713192	THORA SEAL III zestaw do autotransfuzji	3
8888-571463	SENTINEL SEAL zestaw do autotransfuzji	3
8884-713184	Worek do autotransfuzji dla THORA SEAL III, AQUA SEAL, SENTINEL SEAL & ALTITUDE	5



Szklane zestawy do drenażu klatki piersiowej

Szklane zestawy jednorazowego użytku do drenażu klatki piersiowej Argyle*

- Szklane butle jednorazowego użytku
- Duża, różnie stopniowana skala do łatwiejszej i właściwej oceny zdrenowanych płynów
- Uniwersalne nakrętki
- Przewód wykonany z medycznego PCV, w komplecie z łącznikiem do cewnika
- Duża podstawa zapewniająca stabilność zestawu
- Produkt bezłateksowy

NR REF.	OPIS	OBJĘTOŚĆ ZBIORCZA ml	Ilości wzrostowe	ILOŚĆ W OPAK.
8884-726100	Zestaw jednobutłowy	2000	50	6
8884-726200	Zestaw dwubutłowy	2000	50	4
8884-726500	Butla z podwójnym drenem	2000	50	6
8884-728100	Pediatryczny zestaw jednobutłowy	90	1	12
8884-722100	Butla skalowana	2000	50	6



Zestawy drenów

Dla zestawów do drenażu klatki piersiowej Argyle*

- Wykonane z medycznego PCV przewody, sterylne, jednorazowego użytku, przezroczyste, w celu stałej oceny zdrenowanych płynów (średnica 0,71 cm, długość 152 cm)
- Miękki przewód PCV umożliwiający użycie zacisku rolkowego do odprowadzenia i przemieszczania wydzieliny w drenie, typu Roller Milker [nr ref: 8888578888]
- Uniwersalny przykręcany łącznik, który może być także wykorzystany do połączenia z zestawem jednorazowego użytku Thoraseal I
- Zestaw giętkich przewodów umożliwiający regulację ciśnienia hydrostatycznego
- Produkt bezłateksowy

NR REF.	OPIS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU
8884-729300	Dren do zestawu jednobutłowego	12
8884-729700	Dren do zestawu dwubutłowego 2000 ml	12
8884-729500	Dren do zestawu jednobutłowego o poj. 500/2000 ml z regulacją siły ssania	12
8884-729600	Dren do zestawu dwubutłowego o pojemności 2000 ml z regulacją siły ssania	12

* Wszystkie produkty są zarejestrowanymi znakami handlowymi Tyco Healthcare Group LP. © 2001 Tyco Healthcare Group LP. Wszelkie prawa zastrzeżone

M-CT-ARG/PL

tyco
Healthcare

Tyco Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa, Polska
tel. +48 22 3122000
fax +48 22 3122020


www.tycohealth-ece.com

SENTINEL SEAL™

Czterokomorowy system
drenażu opłucnowego



SENTINEL SEAL – przygotowanie i obsługa zestawu do

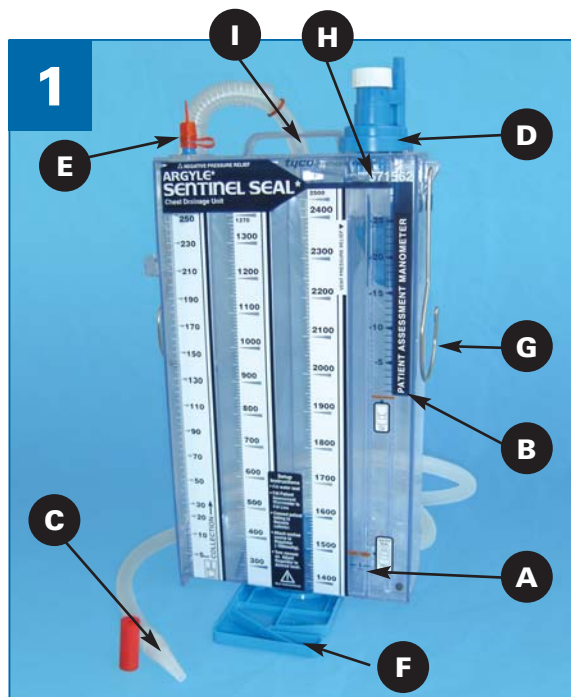

- A** Komora zastawki wodnej
- B** Manometr ciśnienia po stronie pacjenta
- C** Łącznik uniwersalny
- D** Regulator ssania
- E** Zawór upustowy podciśnienia
- F** Podstawa rozkładana
- G** Wieszak metalowy
- H** Zawór upustowy nadciśnienia
- I** Wbudowany uchwyt



Uruchamianie drenażu 1. Napełnij komorę zastawki wodnej

- Otwórz niebieski wlew na tylnej ścianie zestawu
- Wypełnij komorę zastawki wodnej (A) jałowym płynem bezpośrednio przez wlew do linii „0” widocznej u dołu przedniej ściany zestawu lub do linii zastawki wodnej na tylnej ścianie u dołu komory zastawki wodnej (ok. 90 ml)
- Zamknij dokładnie wlew

Uwaga: Aby wyregulować ilość płynu w komorze zastawki wodnej wykorzystaj Port Dostępu Zastawki Wodnej na tylnej ścianie, posługując się strzykawką luer lub luer lock.



Regulacja drenażu 1.

- Aby ustawić przepisaną wartość próżni, należy powoli obracać regulator ssania zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, obserwując manometr pacjenta, aż płyn osiągnie odpowiedni poziom

Uwaga: Po zaciśnięciu drenu opłucnowego możesz nastawić i uwidocznić siłę ssania.



Regulacja drenażu 2.

- Aby zmniejszyć poziom podciśnienia należy wcisnąć zawór upustowy podciśnienia i powoli obracać regulator ssania przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż do uzyskania właściwego poziomu podciśnienia w lewej kolumnie manometru pacjenta

Uwaga: Aby zmniejszyć siłę ssania należy zamknąć dren opłucnowy, nacisnąć zawór upustowy podciśnienia i powoli obracać regulator ssania przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, aż manometr pacjenta pokaże właściwy poziom ssania (Po zdjęciu klemu z drenu opłucnowego może okazać się konieczne ponowne zmniejszenie podciśnienia, jeśli próżnia pacjenta byłaby wyższa od siły ssania).

drenażu klatki piersiowej



Uruchamianie drenażu 2. Napełnij manometr pacjenta

- Usunąć i wyrzucić taśmę z instrukcją z górnej ścianki zestawu
- Wypełnić manometr do czerwonej linii za pomocą jałowego płynu przez okrągły otwór (ok. 35 ml)



Uruchamianie drenażu 3. Podłączenie do drenu opłucnowego i źródła ssania

- Usunąć nasadkę zabezpieczającą z łącznika pacjenta i połączyć go z drenem opłucnowym. Łącznik (C) można przyciąć celem dopasowania do średnicy cewnika, a po połączeniu zabezpieczyć plasterem
- Podłączyć źródło ssania do łącznika na regulatorze ssania
- Ustawić siłę ssania na najmniejszy poziom – 160 mmHg (21 kPa, czyli 0,21 bar)

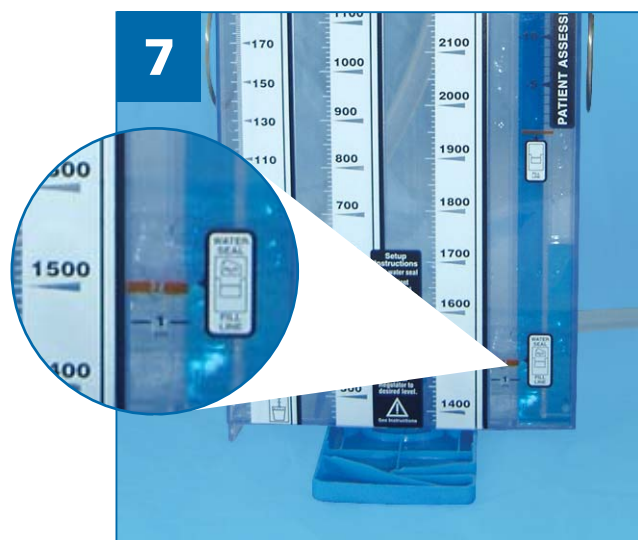


Tabela oceny i regulacji drenażu

Komora oceny pacjenta	Komora zastawki wodnej	Ocena i likwidacja przecieku powietrza
<i>Wychylenie słupa wody</i>	<i>Bąbelkowanie</i>	
Tak	Tak	Świadczy o przecieku powietrza po stronie pacjenta i nierozprężeniu płuca. Im większy stopień bąbelkowania i wahań poziomu płynu, tym większy przeciek i bardziej zapadnięte płuco
Nie	Nie	Świadczy o usunięciu przecieku i ponownym rozprężeniu płuca (dopuszczalne niewielkie wahania poziomu płynu). Upewnij się, że dreny są drożne i nie załamane, zweryfikuj rozprężenie płuca
Nie	Tak	Świadczy o przecieku lub nieszczelności w obrębie urządzenia. Natychmiast zamknij cewnik opłucnowy. Jeśli bąbelkowanie utrzymuje się, istnieje przeciek na połączeniach drenów. Popraw połączenia i zabezpiecz je plasterem
Tak	Nie	Może zdarzać się w przypadku częściowej lub całkowitej pneumonektomii i stanach patologicznych przebiegających ze zmniejszeniem podatności miąższu płuc



Zintegrowany uchwyt



Zawór upustowy podciśnienia



Komora zbiorcza




Rozkładana podstawa




Regulator próżni



Zawór upustowy nadciśnienia

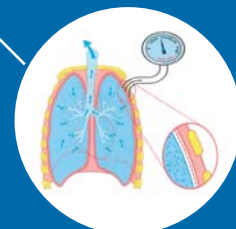

Manometr pacjenta

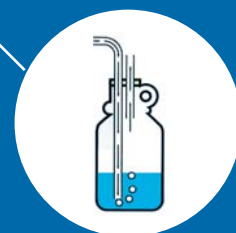

Komora zastawki wodnej

Zestaw do drenażu opłucnowego ALTITUDE – specyfikacja wyrobu

Nr ref.	Opis	Pojemność	Szt. w opak.
8888571562	Zestaw do drenażu opłucnowego SENTINEL SEAL	2500 ml	5
8888571513	Podwójna komora zbiorcza SENTINEL SEAL	1400 ml i 1100 ml	5
8888571489	Zestaw przygotowawczy do autotransfuzji SENTINEL SEAL	2500 ml	5
8884713184	Zestaw uzupełniający do autotransfuzji	1000 ml	5

tyco
Healthcare

Tyco Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa, Polska
tel. +48 22 3122000
fax +48 22 3122020

www.tycohealth-ece.com

Istotna część Twojego świata

CEWNIKI DO
DRENAŻU KLATKI
PIERSIOWEJ,
TROKARY
ORAZ CEWNIKI
PĘPOWINOWE

Cewniki do drenażu klatki piersiowej



tyco
Healthcare

z PCV

SILIKONOWE

Cewniki do drenażu klatki piersiowej oraz śródpiersia

ARGYLE™

- Jednorazowe, cienkościennie cewniki, do drenażu o większej objętości dzięki zewnętrznemu wymiarowi średnicy (długość 50 cm)
- Żłobione zakończenie proksymalne ułatwiające atraumatyczne przejście poprzez mięśnie, pozwalające na uniknięcie szarpania tkanek
- Ścięta końcówka z gładkim, atraumatycznym zakończeniem, zapobiegająca uszkodzeniu tkanek
- Gładkie, eliptyczne oczka redukujące ryzyko urazu oraz zapewniające optymalny drenaż
- Nieprzenikliwe dla promieni RTG (Sentinel Line) i (Sentinel Eye) ułatwiające weryfikację położenia z zastosowaniem promieniowania RTG
- Oznaczenia głębokości
- Przezroczyste ściany dla uwidocznienia drenowanej zawartości
- Materiał termowrażliwy
- Dostępne w wersji prostej oraz zakrzywionej w prawo
- Cewniki do śródpiersia wykonane z silikonu, z płaską poprzeczną częścią oraz sześcioma oczkami
- Produkt bezłateksowy

NR REF.	OPIS	Rozmiar	Kaliber	ILOŚĆ W OPAK.
Cewniki piersiowe				
8888-570507	Prosty z PCV	12	4	10
8888-570515	Prosty z PCV	16	4	10
8888-570523	Prosty z PCV	20	5	10
8888-570531	Prosty z PCV	24	6	10
8888-570549	Prosty z PCV	28	6	10
8888-570556	Prosty z PCV	32	6	10
8888-570564	Prosty z PCV	36	6	10
8888-570572	Prosty z PCV	40	6	10
8888-571018	Zakrzywiony z PCV	16	4	10
8888-571026	Zakrzywiony z PCV	20	5	10
8888-571034	Zakrzywiony z PCV	24	6	10
8888-571042	Zakrzywiony z PCV	28	6	10
8888-571059	Zakrzywiony z PCV	32	6	10
8888-571067	Zakrzywiony z PCV	36	6	10
8888-571075	Zakrzywiony z PCV	40	6	10
8888-572537	Prosty z silikonu	20	5	10
8888-572545	Prosty z silikonu	24	6	10
8888-572552	Prosty z silikonu	28	6	10
8888-572560	Prosty z silikonu	32	6	10
8888-572578	Prosty z silikonu	36	6	10
8888-572586	Prosty z silikonu	40	6	10
8888-573030	Zakrzywiony z silikonu	24	6	10
8888-573048	Zakrzywiony z silikonu	28	6	10
8888-573055	Zakrzywiony z silikonu	32	6	10
8888-573063	Zakrzywiony z silikonu	36	6	10
Cewniki do śródpiersia				
8888-573550	Prosty z silikonu	28	6	10
8888-573568	Prosty z silikonu	34	6	10
Łącznik Y do cewników				
8888-571505	Przedłużenie z lateksu w kształcie litery Y do dwóch cewników piersiowych			10



Cewniki piersiowe

MALLINCKRODT

- Jednorazowe, cienkościenne cewniki, do drenażu o większej objętości dzięki zewnętrznemu wymiarowi średnicy
- Materiał termowrażliwy
- Dostępne w wersji prostej (długość 55cm) oraz zakrzywionej w prawo (długość 45cm)
- Zakończenie proksymalne z ochronną nasadką pozwalające uniknąć urazu podczas wprowadzania
- Ścięta końcówka z gładkim, atraumatycznym zakończeniem, zapobiegająca uszkodzeniu tkanek
- Gładkie, eliptyczne oczka redukujące ryzyko urazu oraz zapewniające optymalny drenaż
- Możliwość weryfikacji położenia z zastosowaniem promieniowania RTG
- Gładka, śliska powierzchnia
- Oznaczenia głębokości
- Przejrzyste ściany dla uwidocznienia drenowanej zawartości
- Produkt bezłateksowy

NR REF.	OPIS	ROZMIAR	IŁOŚĆ W OPAK.
Cewniki piersiowe			
210-16	Prosty z PCV	16	10
210-20	Prosty z PCV	20	10
210-24	Prosty z PCV	24	10
210-28	Prosty z PCV	28	10
210-32	Prosty z PCV	32	10
210-36	Prosty z PCV	36	10
210-40	Prosty z PCV	40	10
209-16	Zakrzywiony z PCV	16	10
209-20	Zakrzywiony z PCV	20	10
209-24	Zakrzywiony z PCV	24	10
209-28	Zakrzywiony z PCV	28	10
209-32	Zakrzywiony z PCV	32	10
209-36	Zakrzywiony z PCV	36	10
209-40	Zakrzywiony z PCV	40	10



Cewniki z trokarem

ARGYLE™

- Termowrażliwy, wykonany z PCV cewnik, osadzony na trokarze, do natychmiastowego zastosowania
- Doskonałe dopasowanie cewnika do trokaru w celu zminimalizowania ryzyka urazu podczas wprowadzania oraz ryzyka zakażenia
- Nieprzenikliwe dla promieni RTG (Sentinel Line) i (Sentinel Eye) ułatwiające weryfikację położenia z zastosowaniem promieniowania RTG
- Oznaczenia głębokości dla prawidłowego umieszczenia
- Trokary dwukanałowe odpowiednie do jednoczesnego drenażu, przepłukiwania oraz podawania środków farmakologicznych do jamy opłucnowej
- Gładkie, eliptyczne oczka redukujące ryzyko urazu oraz zapewniające optymalny drenaż
- Przezrzyste ściany w celu uwidocznienia drenowanej zawartości
- Produkt bezlateksowy (z wyjątkiem dwukanałowych trokarów)

NR REF.	OPIS	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ W OPAK.
Cewniki z trokarem				
8888-560805	Ostra końcówka	8	23	10
8888-561019	Ostra końcówka	10	23	10
8888-561027	Ostra końcówka	12	23	10
8888-561035	Ostra końcówka	16	25	10
8888-561043	Ostra końcówka	20	40	10
8888-561050	Ostra końcówka	24	40	10
8888-561068	Ostra końcówka	28	40	10
8888-561076	Ostra końcówka	32	40	10
1 180-561415	Ścięta końcówka	10	20	10
1 180-561423	Ścięta końcówka	12	23	10
1 180-561431	Ścięta końcówka	16	25	10
1 180-561449	Ścięta końcówka	20	40	10
1 180-561456	Ścięta końcówka	24	40	10
1 180-561464	Ścięta końcówka	28	40	10
1 180-561472	Ścięta końcówka	32	40	10
1 180-562009	Dwukanałowa ostra końcówka	12	25	10
1 180-562017	Dwukanałowa ostra końcówka	16	30	10
1 180-562025	Dwukanałowa ostra końcówka	20	40	10
1 180-562033	Dwukanałowa ostra końcówka	24	40	10
1 180-562041	Dwukanałowa ostra końcówka	28	40	10
8888-561514	Wymienny cewnik	10	23	10
8888-561522	Wymienny cewnik	12	23	10
8888-561530	Wymienny cewnik	16	25	10
8888-561548	Wymienny cewnik	20	40	10
8888-561555	Wymienny cewnik	24	40	10
8888-561563	Wymienny cewnik	28	40	10
8888-561571	Wymienny cewnik	32	40	10



Cewniki z trokarem

MALLINCKRODT

- Termowrażliwy, wykonany z PCV cewnik, osadzony na trokarze, do natychmiastowego zastosowania
- Doskonale dopasowanie cewnika do trokaru w celu zminimalizowania ryzyka urazu podczas wprowadzania oraz ryzyka zakażenia
- Gładkie, eliptyczne oczka redukujące ryzyko urazu oraz zapewniające optymalny drenaż
- Możliwość weryfikacji położenia z zastosowaniem promieniowania RTG
- Gładka, śliska powierzchnia
- Oznaczenia głębokości w celu prawidłowego umieszczenia
- Przezrzyste ściany dla uwidocznienia drenowanej zawartości
- Produkt bezlateksowy



NR REF.	OPIS	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ W OPAK.
211-10	Cewniki z trokarem	10	22	10
211-12	Cewniki z trokarem	12	25	10
211-16	Cewniki z trokarem	16	25	10
221-20	Cewniki z trokarem	20	40	10
221-24	Cewniki z trokarem	24	40	10
221-28	Cewniki z trokarem	28	40	10
221-32	Cewniki z trokarem	32	40	10

Cewniki pępowinowe

ARGYLE™ jednokanałowe

Do ciągłego lub przerywanego dostępu do tętnicy lub żyły pępkowej. Przeznaczone do pomiaru ciśnienia, pobierania próbek, infuzji oraz transfuzji.

- Cewniki jednorazowego użytku, z przezroczystego poliuretanu, odporne na tłuszcze, miękkie i termowrażliwe
- Okrągła, otwarta, atraumatyczna końcówka
- Wskaźniki głębokości ze stopniowaniem co 1 cm, ułatwiające precyzyjne wprowadzenie
- Nieprzenikliwe dla promieni RTG, umożliwiające kontrolę położenia
- Proksymalne skrzydełka oraz przezroczysta część



centralna pozwalająca na ujawnienie przepływu oraz wspomagająca umieszczanie cewnika

- Łącznik typu LUER-LOCK
- Produkt bezlateksowy


NR REF.	OPIS	LINIE NIEPRZETNERNE DLA RTG	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ cm	IŁOŚĆ W OPAK.
8888-160325	Poliuretan	3	2,5	30,5	10
8888-160333	Poliuretan	3	3,5	38,0	10
8888-160341	Poliuretan	3	5,0	38,0	10

Cewniki pępowinowe

ARGYLE™ wielokanałowe

Dają możliwość dostępu do tętnicy lub żyły pępkowej z możliwością jednoczesowego leczenia. Przeznaczone do pomiaru ciśnienia, pobierania próbek, infuzji oraz transfuzji. Trzy kanały redukują uraz punkcyjny oraz minimalizują ryzyko posocznicy, skracają czas leczenia.

- Cewniki jednorazowego użytku z przezroczystego poliuretanu, zapobiegające tworzeniu się skrzepin, miękkie i termowrażliwe
- Okrągła, otwarta, atraumatyczna końcówka
- Wskaźniki głębokości co 1 cm ułatwiające precyzyjne wprowadzenie
- Podwójna warstwa nieprzenikliwa dla promieni RTG umożliwiającą weryfikację położenia
- Proksymalne skrzydełka oraz przezroczysta część

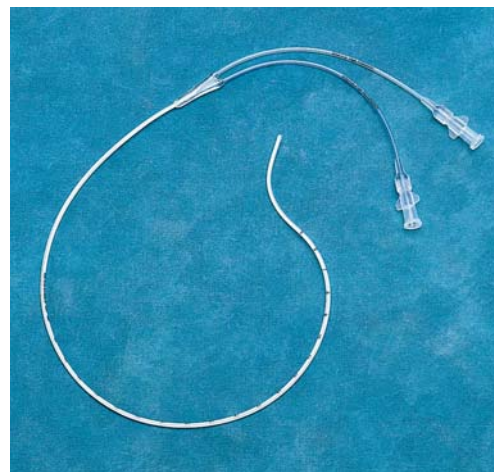


centralna pozwalająca na ujawnienie przepływu oraz wspomagająca umieszczanie cewnika

- Łącznik typu LUER-LOCK
- Produkt bezlateksowy

NR REF,	KANAŁY	ROZMIAR	ROZMIAR WEWNĘTRZNY	DŁUGOŚĆ cm	IŁOŚĆ W OPAK,
8888-160531	2	3,5	20-23	38,0	5
8888-160556	2	5	18-21	38,0	5
8888-160648	3	5	18-21-21	38,0	5
8888-160663	3	8	15-18-18	38,0	5

SHUNTY,
LEJCE, PĘTLE
NACZYNIOWE
I INNE

Akcesoria dla procedur kardiochirurgicznych

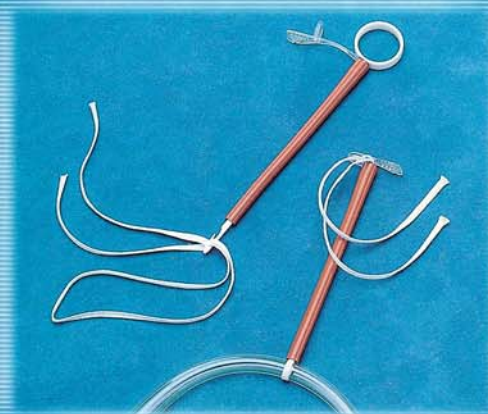

tyco
Healthcare

Cewnik lewokomorowy

Cewnik dwukanałowy ARGYLE™



- Jednorazowy cewnik do wentowania lewej komory serca, pokryty cienkościnnym, termowrażliwym PCV
- Zamknięte oraz wąskie zakończenie w celu łatwiejszego umieszczenia w sercu, z minimalnym ryzykiem urazu
- Dwa pierścienie zaczepowe (jeden ruchomy, drugi umocowany)
- Cztery otwory w pobliżu zakończenia dystalnego, zapewniające optymalny drenaż
- Nieprzepuszczalny dla fal RTG (Sentinel Line), w celu łatwego sprawdzenia prawidłowego umieszczenia w sercu
- Wbudowany łącznik zapewniający perfekcyjne uszczelnienie
- Cewnik dwukanałowy do lewej komory umożliwia zastosowanie centralnego kanału do drenażu, zaś drugiego kanału do zapobiegania nadmiernym zmianom ciśnienia dodatniego lub ujemnego, przepływania lub do monitorowania ciśnienia systemowego
- Produkt bezłateksowy

NR REF.	ROZMIARY Ch	ROZMIARY ZEWNĘTRZNE mm	ILOŚĆ W OPAKOWANIU
8888-590208	14	4,7	10
8888-590216	18	6,0	10
8888-590224	20	6,7	10



T.H.I.

Kaniula do perfuzji aortalnej ARGYLE™

- Kaniula do perfuzji aortalnej jednorazowego użytku, z czystego PCV, nietoksyczna i niepirogenna,
- Niebieska linia wzdłuż kaniuli ułatwia orientację końcówki podczas wprowadzania (w modelu zagiętym ułatwia identyfikację zagięcia)
- Niebieski pierścień ułatwia wprowadzanie oraz zapobiega uszkodzeniu ściany aorty
- Krótkie zakończenie, by uniknąć ryzyka zatoru podczas wprowadzania
- Zaokrąglone końcówki ułatwiają wprowadzanie oraz zmniejszają uraz
- Gładki, cienkościnnny kanał wewnętrzny umożliwia maksymalny przepływ z minimalnym ryzykiem urazu
- Produkt bezłateksowy



NR REF.	OPIS	ROZMIARY	DŁUGOŚĆ mm	ILOŚĆ W OPAKOWANIU
8888-591008	Kaniula zakrzywiona	10	19	10
8888-591123	Kaniula zakrzywiona	12	20	10
8888-591024	Kaniula zakrzywiona	14	22	10
8888-591149	Kaniula zakrzywiona	16	23	10
8888-591040	Kaniula zakrzywiona	18	25	10
8888-591065	Kaniula zakrzywiona	21	31	10
8888-591081	Kaniula zakrzywiona	24	38	10
8888-591016	Kaniula prosta	10	13	10
8888-591131	Kaniula prosta	12	14	10
8888-591032	Kaniula prosta	14	15	10
8888-591156	Kaniula prosta	16	16	10
8888-591057	Kaniula prosta	18	17	10
8888-591073	Kaniula prosta	21	22	10
8888-591099	Kaniula prosta	24	25	10
8888-593012	Łącznik dla dorosłych 3,8" – 9,5 mm średnicy		-	10
8888-593038	Łącznik pediatryczny 1,4" – 6,4 mm średnicy		-	10

Cewnik Fergusona z ARGYLE™

- Jednorazowy, przezroczysty cewnik do komory i/lub przedsionka, pokryty cienkościnnym, termowrażliwym PCV
- Giętki przewód wewnątrz cewnika w celu łatwiejszego umieszczenia w komorze
- Zamknięte oraz wąskie zakończenie dystalne w celu natychmiastowego umieszczenia w sercu z minimalnym ryzykiem urazu
- Głębokie rowki ułatwiające prawidłowe umieszczenie oraz redukcję ryzyka urazu serca
- Wbudowany łącznik zapewniający perfekcyjne uszczelnienie
- Produkt bezłateksowy



NR REF.	ROZMIARY	ROZMIARY ZEWNĘTRZNE mm	ROZMIARY Długość cm	ILOŚĆ W OPAKOWANIU
8888-590018	18	6,0	51	10
8888-590026	24	8,0	51	10

Shunt tętnicy szyjnej ARGYLE™

- Jednorazowy, przezroczysty shunt, wykonany z medycznego PCV, niepirogenny
- Optywowe zakończenie ułatwiające umieszczenie
- Nieprzepuszczalny dla promieni RTG, co umożliwia kontrolę umieszczenia za pomocą radiografii
- Dostępny w czterech rozmiarach, zapewniający odpowiedni wybór dla optymalnej perfuzji
- Produkt bezłateksowy



NR REF.	OPIS	DŁUGOŚĆ cm	ILOŚĆ W OPAKOWANIU
8888-577775	Shunt tętnicy szyjnej	23	10
Numer kodu obejmuje następujące shunty: 8 Ch (2,7 mm), 10 Ch (3,3 mm), 12 Ch (4,0 mm), 14 Ch (4,7 mm)			

Lejce naczyniowe w zestawie

Lejce naczyniowe w zestawie ARGYLE™

- Obejmuje dwie osłonki z zabezpieczającą nasadką, 1 obturator oraz 2 taśmy mocujące $\times 3,2 \text{ mm} \times 61 \text{ cm}$
- Zatyczka może być stosowana z taśmą mocującą, szwami jedwabnymi 2/0 lub nylonowymi 7/0, co zapewnia wszechstronne zastosowanie
- Zabezpieczająca nasadka zapewnia bezpieczeństwo i chroni przed ryzykiem ześlizgnięcia się
- Wcześniejszy montaż komponentów pomaga zaoszczędzić czas
- Produkt bezłateksowy




NR REF.	OPIS	ILOŚĆ W OPAK.
8888-585000	Zestaw turnikietów	10

Pętle Sentinel

Pętle naczyniowe ARGYLE™

- Jednorazowe pętle naczyniowe pokryte w 100% silikonem
- Nieprzepuszczalne dla promieni RTG
- Kodowane kolorem
- Mięka powierzchnia
- Bezłateksowe

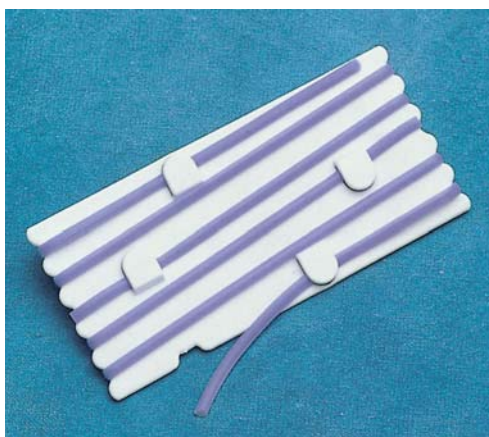


NR REF.	OPIS	DŁUGOŚĆ cm	ILOŚĆ W OPAK.
8888-585208	Niebieski	38	10
8888-585216	Czerwony	38	10
8888-585224	Żółty	38	10
8888-585232	Biały	38	10
8888-585240	Jasnoniebieski	35,5	10
8888-585257	Jasnoczerwony	35,5	10
8888-585265	Jasnożółty	35,5	10
8888-585273	Biały	35,5	10

Dreny PENROSE

- Produkty lateksowe
- Nieprzepuszczalne dla promieni RTG
- Przeznaczone do drenażu rany

NR REF.	ROZMIARY Średnica mm	ROZMIARY Długość cm	ILOŚĆ W OPAK.
8888-513002	6	30	50
8888-513200	8	30	50
8888-513408	10	30	50
8888-513606	13	30	50
8888-513804	16	30	50
8888-514000	19	30	50
8888-514208	22	30	50
8888-514406	25	30	50
8888-514604	6	45	50
8888-514802	8	45	50
8888-515007	10	45	50
8888-515205	13	45	50
8888-515403	16	45	50
8888-515601	19	45	50
8888-515809	25	45	50

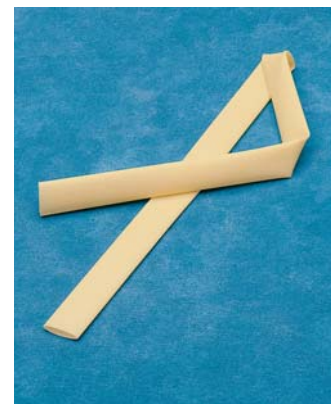

Dreny Saratoga

Dreny do jamy brzusznej ARGYLE

- Jednorazowe, wykonane z termowrażliwego PCV, do praktycznego oraz bezpiecznego usuwania płynów z jamy brzusznej
- Współosiowa rurka z kanałem przepuszczającym powietrze, zapobiegająca wgłębieniu tkanek oraz zapewnia właściwe ciśnienie, gdy nie ma już płynu do zdrenowania
- Wyżłobiona boczna powierzchnia w celu zredukowania ryzyka obstrukcji
- Nieprzepuszczalne dla promieniowania RTG (Sentinel Line) oraz (Sentinel Eye) w celu łatwego sprawdzenia prawidłowego umieszczenia
- Optywowy łącznik z ostrym końcem w celu zmniejszenia ryzyka urazu podczas penetracji przez skórę

NR REF.	ROZMIARY Średnica mm	ROZMIARY Długość cm	KALIBER	ILOŚĆ W OPAK.
8888-530519	Sonda do drenażu jamy brzusznej	10 wzdłuż części dystalnej	16 30	10
8888-530527	Sonda do drenażu jamy brzusznej	10 wzdłuż części dystalnej	20 30	10
8888-530543	Sonda do drenażu jamy brzusznej	10 wzdłuż części dystalnej	24 30	10
8888-530535	Sonda do drenażu jamy brzusznej	10 wzdłuż części dystalnej	28 30	10
8888-530550	Sonda do drenażu jamy brzusznej	10 wzdłuż części dystalnej	34 30	10
8888-530568	Sonda do drenażu jamy brzusznej	10 wzdłuż części dystalnej	40 30	10
8888-531012	Sonda do drenażu jamy brzusznej	18 wzdłuż części dystalnej	16	10
8888-531020	Sonda do drenażu jamy brzusznej	18 wzdłuż części dystalnej	20	10
8888-531038	Sonda do drenażu jamy brzusznej	18 wzdłuż części dystalnej	24	10
8888-531046	Sonda do drenażu jamy brzusznej	18 wzdłuż części dystalnej	28	10
8888-531053	Sonda do drenażu jamy brzusznej	18 wzdłuż części dystalnej	34	10
8888-531061	Sonda do drenażu jamy brzusznej	18 wzdłuż części dystalnej	40	10





* Wszystkie produkty są zarejestrowanymi znakami handlowymi Tyco Healthcare Group LP. © 2005 Tyco Healthcare Group LP. Wszelkie prawa zastrzeżone

M-CT-ARG/PL

tyco

Healthcare

Tyco Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa, Polska
tel. +48 22 3122000
fax +48 22 3122020


www.tycohealth-ece.com

TURKEL™

Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej

Skuteczny, niezawodny i dokładny zestaw diagnostyczno-terapeutyczny TURKEL™ z igłą i cewnikiem; dwukolorowy wskaźnik pozycji igły pozwala na minimalizację ryzyka:

- omyłkowego nakłucia płuca
- odmy opłucnej

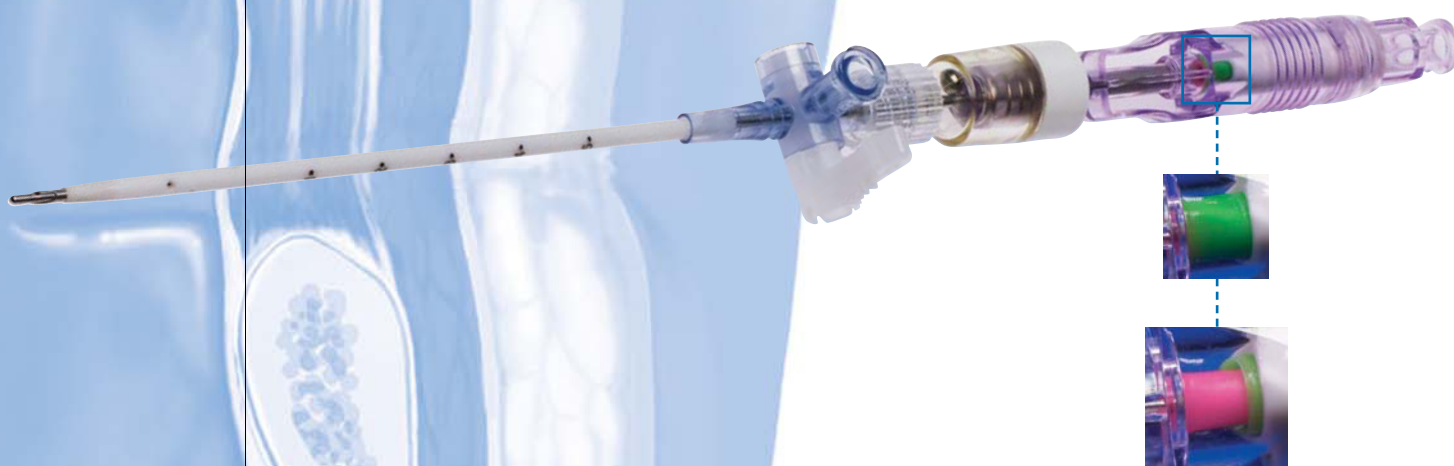

TURKEL

Bezpieczniejsza praca dzięki sygnalizacji położenia igły

tyco

Healthcare

KENDALL

Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej TURKEL™ zawiera:

Bezpieczną igłę z:

tępa kaniulą zabezpieczającą umieszczoną w kanale igły, która

- chroni niżej położone tkanki przed nieumyślnym nakłuciem
- wsuwa się do kanału igły podczas penetracji tkanek
- samoczynnie wysuwa się poniżej ostrza igły, kiedy trafia ona do pustej przestrzeni
- liczne boczne otwory umożliwiają drenaż lub aspirację;

kolorowym wskaźnikiem bezpieczeństwa w złączu igły, który

- zapewnia bezpośrednią sygnalizację położenia kaniuli zabezpieczającej po wprowadzeniu igły
- kolor czerwony – kaniula zabezpieczająca wsunięta do wnętrza igły
- kolor zielony – kaniula wysunięta poza ostrze igły;

jednokierunkowym zaworem wentylowym w złączu igły, który

- umożliwia ewakuację powietrza i płynu z jamy opłucnej, zapobiegając jednocześnie przedostawaniu się powietrza w przeciwnym kierunku
- zapobiega niezamierzonej odmie opłucnowej podczas zabiegu.

Bezpieczny cewnik z:

zaworem kulowym z ręczną blokadą w złączu cewnika, który

- zamyka światło cewnika podczas wycofywania igły
- chroni przed przypadkową odmą opłucnową w trakcie zabiegu
- blokada zaworu kulowego zapewnia możliwość wygodnego podłączenia drenażu.



Zamówienia

Kod	Opis	Ilość
8888-566067	Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej Turkel Bezpieczne igła i dren do nakłucia klatki piersiowej, rozm. 8 Ch, strzykawka 50 ml Monoject™ luer lock Worek do drenażu 2000 ml	10 kpl./opak.

™ TURKEL i MONOJECT są znakami towarowymi Sherwood Services AG, podmiotu zależnego Tyco Healthcare Group LP. Znak towarowy Tyco Healthcare Group LP lub jej podmiotu zależnego. © 2005 Tyco Healthcare Group LP. Wszelkie prawa zastrzeżone

M-CT-TURKEL /PL

tyco
Healthcare

Tyco Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa, Polska
tel. +48 22 3122000
fax +48 22 3122020

www.tycohealth-ece.com

KENDALL