



Ethicon Endo-Surgery Stapler okrężny (ILS)



**Ethicon
Endo-Surgery**

PART OF THE JOHNSON & JOHNSON FAMILY OF COMPANIES

Ethicon Endo-Surgery Stapler okrężny (ILS):

Stapler okrężny ILS Ethicon Endo-Surgery, z zszywkami o regulowanej wysokości zamknięcia, umożliwia kontrolowanie zakresu kompresji tkanki w zależności od sytuacji klinicznej.

Kluczowe korzyści

- **Stapler o dużych możliwościach adaptacyjnych:
Kontrolowana Kompresja Tkanek**

Możliwość dostosowania urządzenia do indywidualnych grubości tkanek i ich zdolności do poddawania się kompresji.

Możliwość akomodacji skompresowanych tkanek o grubości od 1,0 mm do 2,5 mm.

Wysokość otwartej zszywki – 5,5 mm – możliwość uformowania prawidłowej linii szwu nawet w przypadku grubych tkanek.

Skala kompresji tkanki – możliwość określenia grubości skompresowanej tkanki przez operatora w trakcie zabiegu.

- **Większa efektywność magazynowa i kosztowa**

Technologia Regulowanej Wysokości Zszywek – uproszczenie procedury zamawiania i magazynowania staplerów.

Dwustopniowy mechanizm zamykania, szybszego w początkowej fazie i wolniejszego w miarę zbliżania się do siebie tkanek gwarantujący kontrolę kompresji



Opatentowana podkładka zapewniająca akustyczne i dotykowe sygnały wskazujące zakończenie sekwencji strzału

Antyrefleksowe szczelne ramię (ECS)
stworzone w celu zapobiegania utracie
odmy otrzewnowej podczas zabiegów
laparoskopowych




**Antypoślizgowy uchwyt o mniejszym
rozstawie** zapewniający większy
komfort i pełną kontrolę

Nowość: Skala Kompresji Tkanki

Większa Skala Kompresji Tkanki
poprawiająca widoczność
i łatwość użytkowania

Oznaczenia
w zielonym polu
odpowiadające
następującym
przybliżonym
grubościom
skompresowanej
tkanki:

2,5 mm
2,0 mm
1,5 mm
1,0 mm

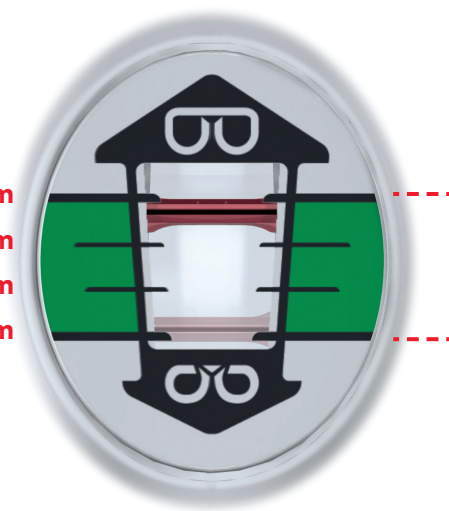

Aplikacja staplera gdy
wskaźnik znajduje się
w zielonym polu, gwaran-
tuje odpowiednią do gru-
bości skompresowanej
tkanki wysokość zamknię-
cia zszywki (od 1,0 mm
do 2,5 mm)



Specyfikacja:

Kod	Opis	szt./op.
CDH21A	Zakrzywiony stapler okrężny (ILS), średnica 21 mm, regulowana wysokość zszywek	3
CDH25A	Zakrzywiony stapler okrężny (ILS), średnica 25 mm, regulowana wysokość zszywek	3
CDH29A	Zakrzywiony stapler okrężny (ILS), średnica 29 mm, regulowana wysokość zszywek	3
CDH33A	Zakrzywiony stapler okrężny (ILS), średnica 33 mm, regulowana wysokość zszywek	3
ECS21A	Endoskopowy zakrzywiony stapler okrężny (ILS), średnica 21 mm, regulowana wysokość zszywek	3
ECS25A	Endoskopowy zakrzywiony stapler okrężny (ILS), średnica 25 mm, regulowana wysokość zszywek	3
ECS29A	Endoskopowy zakrzywiony stapler okrężny (ILS), średnica 29 mm, regulowana wysokość zszywek	3
ECS33A	Endoskopowy zakrzywiony stapler okrężny (ILS), średnica 33 mm, regulowana wysokość zszywek	3
SDH21A	Prosty stapler okrężny (ILS), średnica 21 mm, regulowana wysokość zszywek	3
SDH25A	Prosty stapler okrężny (ILS), średnica 25 mm, regulowana wysokość zszywek	3
SDH29A	Prosty stapler okrężny (ILS), średnica 29 mm, regulowana wysokość zszywek	3
SDH33A	Prosty stapler okrężny (ILS), średnica 33 mm, regulowana wysokość zszywek	3

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę kontaktować się z regionalnym przedstawicielem EES.

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.,
ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa,
tel. +48 22 237 80 21

